

Support de commande déportée pour *Instafold* (M21908100)**Notice de montage**


Outil nécessaire :
tournevis cruciforme empreinte PH2

Contenu du sachet :

- o 3 vis papillon
- o 2 colliers de serrage
- o 1 support de positionnement du joystick
- o 2 vis à tête fraisée
- o 2 rondelles creuses



- 1** Dévisser le serrage (A) sous l'accoudoir et retirer le joystick et la tige support.

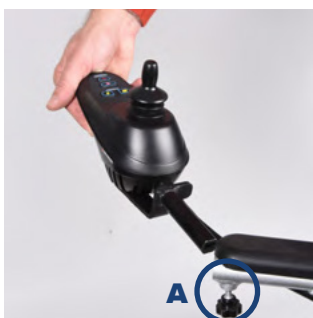

- 2** A l'aide du tournevis, retirer les 2 vis fixant le joystick à la tige support (vis non réutilisées par la suite).



- 3** Inverser le sens de la tige support afin que celle-ci pointe vers l'avant du joystick.

Le fixer à l'aide de 2 vis papillon fournies.



- 4** Positionner les 2 colliers de serrage à l'endroit souhaité sur la barre supérieure du dossier. (Montage à droite ou à gauche)



- 5** Fixer le support de positionnement et serrer les colliers à l'aide des 2 vis à tête fraisée et des 2 rondelles creuses fournies.



- 6** Insérer la tige support et verrouiller la position à l'aide de la 3^{ème} vis papillon (B). Repositionner le câble à l'aide des fixations d'origine.



Procéder à l'inverse pour remettre le joystick en position au niveau de l'accoudoir.

(note : lors du démontage, des marques de compression peuvent subsister sur la mousse)

Joystickhalterung (Begleitsteuerung) für Instafold**Montageanleitung**


 Benötigtes Werkzeug :
Kreuzschlitzschraubendreher
mit PH2-Schlitz

Inhalt:

- o 3 x Flügel-Schrauben
- o 2 x Montage-Schellen
- o 1 x Halterung zur Joystick-Positionierung
- o 2 x Senkkopfschrauben
- o 2 x Unterlegscheiben



- 1** Lösen Sie die Klemmung (A) unter der Armlehne und entfernen Sie den Joystick und die Haltestange.

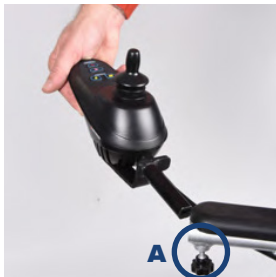

- 2** Entfernen Sie mit dem Schraubendreher die beiden Schrauben, mit denen der Joystick an der Halterung befestigt ist.
(diese Schrauben werden später nicht wieder verwendet).



- 3** Kehren Sie die Richtung der Joystickhalterung um, so dass er diese zur Vorderseite des Joysticks zeigt. Befestigen Sie die Halterung mit den 2 mitgelieferten Flügel-Schrauben.



- 4** Positionieren Sie die 2 Montage-Schellen an der gewünschten Stelle an der oberen Stange der Rückenlehne. (Montage rechts oder links möglich)



- 5** Befestigen Sie die Halterung an den beiden Schellen; mit den im Lieferumfang befindlichen 2 Senkkopfschrauben und den Unterlegscheiben.



- 6** Führen Sie die Joystickhalterung in die Halterung für die Begleitsteuerung ein und mit der einer Flügel-Schraube (B) fixieren. Positionieren Sie das Joystickkabel mithilfe der Originalbefestigung



Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um den Joystick wieder in die selbstfahrer Position zu bringen.

(Hinweis: Bei der Demontage können Druckstellen und /oder Schäden an der Rückenlehne entstehen.)



Remote control support for *Instafold* Powerchair

Installation instructions

 Required tool:
Phillips screwdriver PH2 imprint

Contents of the bag:

- o 3 butterfly screws
- o 2 clamps
- o 1 joystick positioning support
- o 2 countersunk head screws
- o 2 washers



- 1** Unscrew the clamp from under the armrest (A), then remove the joystick and support rod.



- 2** Using the screwdriver, remove the 2 screws securing the joystick to the support rod (screws not to be reused in the following point 3).



- 3** Reverse the direction of the support rod so that this points towards the front of the joystick. Secure it using the 2 butterfly screws provided in the new kit.



- 4** Position the 2 clamps to point towards you, on the top foam covered bar of the powerchair, to a maximum of 12 cm from the edge. (Either right or left mounting)



- 5** Attach the positioning support and tighten the clamps using the 2 countersunk head screws and 2 washers supplied.



- 6** Insert the support rod and lock the position using the 3rd butterfly screw (B). Reposition the cable using the original fixings.



Proceed in reverse to return the joystick to the position armrest level. (note: during disassembly, compression marks may remain on the foam)

ME54079200

