

Diamond und Diamond Deluxe



ROLLATOREN

Zubehör: Stockhalter

MONTAGEANLEITUNG

Montage

Entfernen Sie diese Schraube an der Aufnahme für das Vorderrad (Wahlweise auf der linken oder rechten Seite) und setzen Sie hier den Stockhalterbecher mit der mitgelieferten Schraube wie unten gezeigt ein. Dann Schraube wieder sicher anziehen!

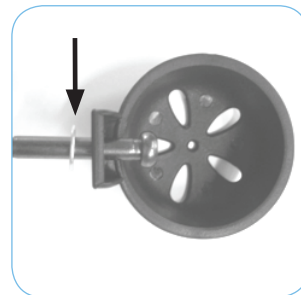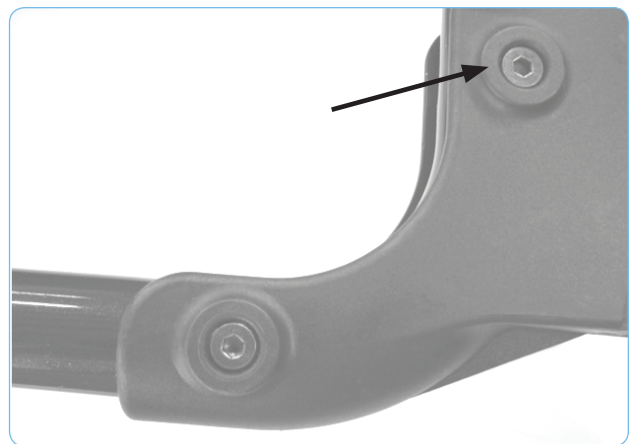

ACHTUNG: Auf richtige Position der U-Scheibe achten !

Das Klettband durch Schließen des Druckknopfes am unteren Rohr des Haltegriffes befestigen und Klettband auf Stockdurchmesser einstellen.



Stand: 06/2013

Diamond und Diamond Deluxe



ROLLATOR

Accessories: Cane holder

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly

Remove this bolt on the holder for the front wheel (either on the left or right side) and insert the cane holder cup with the bolt supplied as shown below. Then tighten the bolt again!

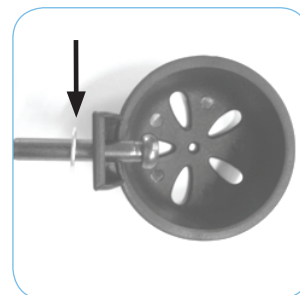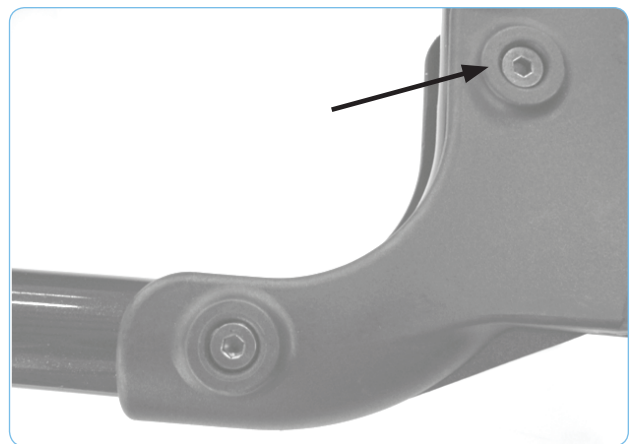

ATTENTION: Ensure correct position of the washer!



Fix the Velcro© tape to the lower tube of the handle by fastening the press-stud and adjust Velcro© tape to cane diameter.

As per: 06/2013

Diamond und Diamond Deluxe


ROLLATOR

Accessoire: Porte canne


INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

Montage


Retirer la vis de fixation de l'une des roues avant (au choix à gauche ou à droite) et y fixer la pièce inférieure du porte-canne à l'aide de la vis fournie à cet effet, comme montré ci-dessous. Puis resserrer la vis !

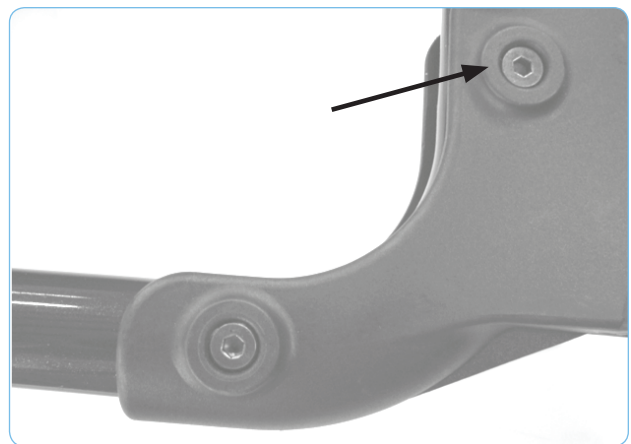

Faire **ATTENTION** que la rondelle en U soit en bonne position !

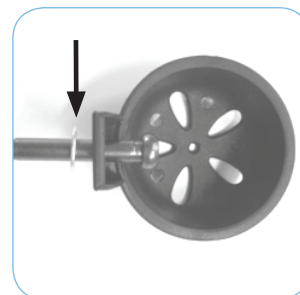

Fixer la bande Velcro à l'aide du bouton pression sur le tube inférieur de la poignée et adapter le diamètre de la bande à celui de la canne.

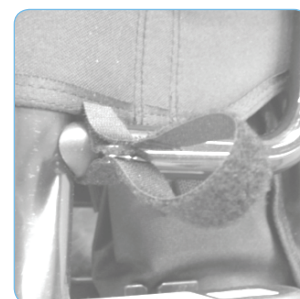

Actualisation: 06/2013

Diamond und Diamond Deluxe


ROLLATOR

Accessoire: Stokhouder


MONTAGEHANDLEIDING

Montage


Verwijder deze schroef aan het bevestigingspunt voor het voorwiel (desgewenst aan de linker of rechter zijde) en plaats hier de stokhouderbeker d.m.v. de meegeleverde schroef zoals onder afgebeeld in. Draai vervolgens schroef weer vast aan

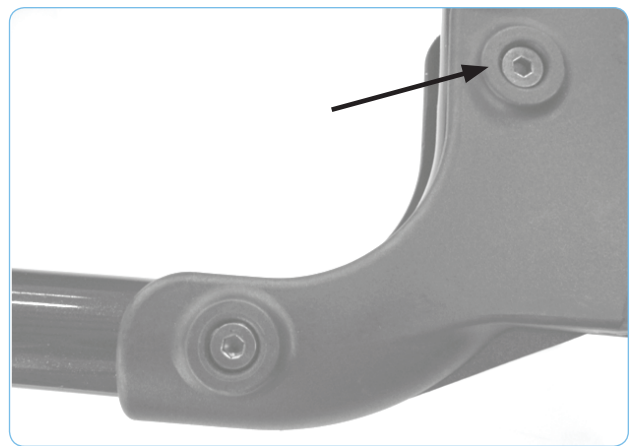

LET OP: Plaats de onderlegschiif in de goede positie!

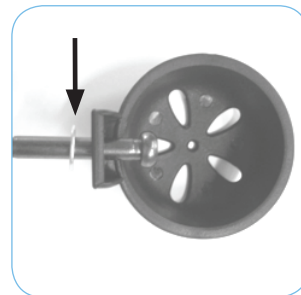

Bevestig het klittenband door de drukknop aan de onderste buis van de greep dicht te drukken en stel de klittenband in op de doorsnede van de stok.

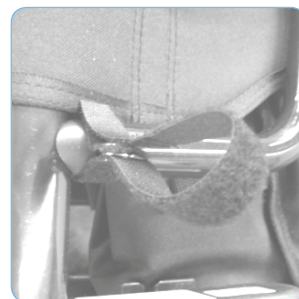

Stand: 06/2013