

Montageanleitung Gehstützen Halterung

Produkt: Nitro Glide

Artikelnr.: 700500100

DE

Die Gehstützen Halterung für Ihren Fußentlastungsrollator Nitro Glide wird am Kniepolster befestigt. Um eine reibungslose Montage zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgende Montageanleitung sorgfältig durch.

Die Montage der Halterung wird individuell an den Patienten angepasst. Ausschlaggebend hierfür ist, ob die linke oder rechte Extremität des Nutzers verletzt ist.

Schritt 1


Entnehmen Sie das Kniepolster aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial oder demontieren Sie dieses von Ihrem Nitro Glide laut Gebrauchsanweisung.

Legen Sie das Kniepolster auf die gepolsterte Fläche, sodass das Einsteckrohr nach oben zeigt.



Schritt 2

Demontieren Sie die vier Schrauben, indem Sie einen passenden Innensechskant (Größe 5/32) verwenden und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (Bild 2). Nehmen Sie die beiden mitgelieferten Halterungen, legen diese in die gewünschte Position und befestigen Sie diese mit den vorher demontierten Schrauben (Bild 3).

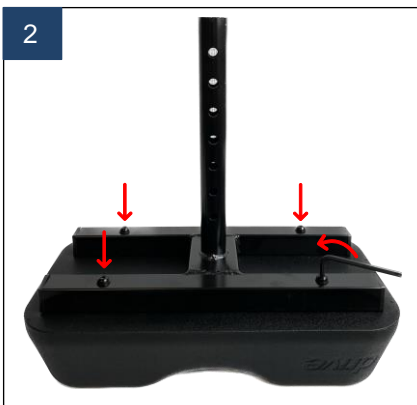

Montageanleitung Gehstützen Halterung

Produkt: Nitro Glide

Artikelnr.: 700500100

Schritt 3

Nachdem alle Schrauben befestigt sind, kann das Kniepolster laut Gebrauchsanweisung an Ihrem Nitro Glide montiert werden (Bild 4).

Die Halterung Ihrer Gehstützen kann nun verwendet werden. Hierzu wird je eine Gehstütze in die obere und eine Gehstütze in die untere Befestigung geclipst (Bild 5).



Assembly Instruction Crutch holder

Product: Nitro Glide

Item code: 700500100

EN

The crutch holder for your Nitro Glide Knee Walker should be attached to the underside of the knee pad. For easy assembling, please read and follow the instructions below.

The assembling of the crutch holder should be done to meet individual patient requirements and can be fitted on the left or right of the unit, depending on the patients injured, non-weight bearing leg.

Step 1

Remove the knee pad from the box and remove all packaging material, or remove the knee pad from the Nitro Glide Walker.


Place the knee pad on its padded surface so that the stem tube faces upwards, as shown below. (pic. 1).



Step 2

Remove the four screws by turning anti-clockwise with an appropriate hexagon/Allen key (size 5/32) (Pic. 2).

Place the crutch holder brackets provided into position and replace the four screws. (Pic. 3).

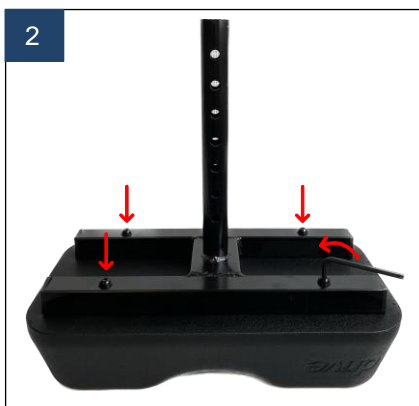

Assembly Instruction Crutch holder

Product: Nitro Glide

Item code: 700500100

Step 3

Now that the crutch holder brackets have been assembled, please refer to the Instruction for Use manual and install the knee pad.

To use the crutch holder, place one crutch top and bottom into the bracket clips as shown below. (Pic. 5).

